



shamir



LENTES PROGRESIVOS

Shamir

Autograph™ III

Una nueva experiencia visual

Shamir

Autograph™ III

Una nueva experiencia visual

El equipo de I + D de Shamir se centró en el hecho de que, aunque su diseño de lente es el mismo, el campo de visión percibido por cada paciente es significativamente diferente según el signo de su receta. Una lente de potencia negativa aumenta el campo de visión, mientras que una lente de potencia positiva tiene el efecto de reducir el campo de visión. Esto da como resultado que los pacientes hipermétropes experimenten un campo de visión más estrecho que el experimentado por sus contrapartes miopes.

Basado en un innovador concepto de diseño de lentes, Shamir Autograph™ III es una nueva lente progresiva equilibrada, adaptada integralmente al paciente y que garantiza una experiencia visual clara y cómoda para todos.

¿Por qué elegir Shamir Autograph™ III?

Innovador concepto para el diseño de lentes progresivo que se adapta de manera integral al paciente.

Por primera vez Shamir lanza al mercado un progresivo que ofrece un diseño diferente para pacientes miopes e hipermétropes.

Shamir Autograph™ III ahora con adiciones

+0.75

Desde

+4.00

Hasta

Cuándo recomendar Shamir Autograph™ III

+40

Cuando los pacientes tienen más de 40 años de edad.




Personas que buscan la mejor calidad visual con el mejor desempeño en progresivos.



Personas exigentes que demandan productos de excelencia y buscan tener el mejor progresivo digital.



Personas dispuesta a pagar por una insuperable calidad visual.

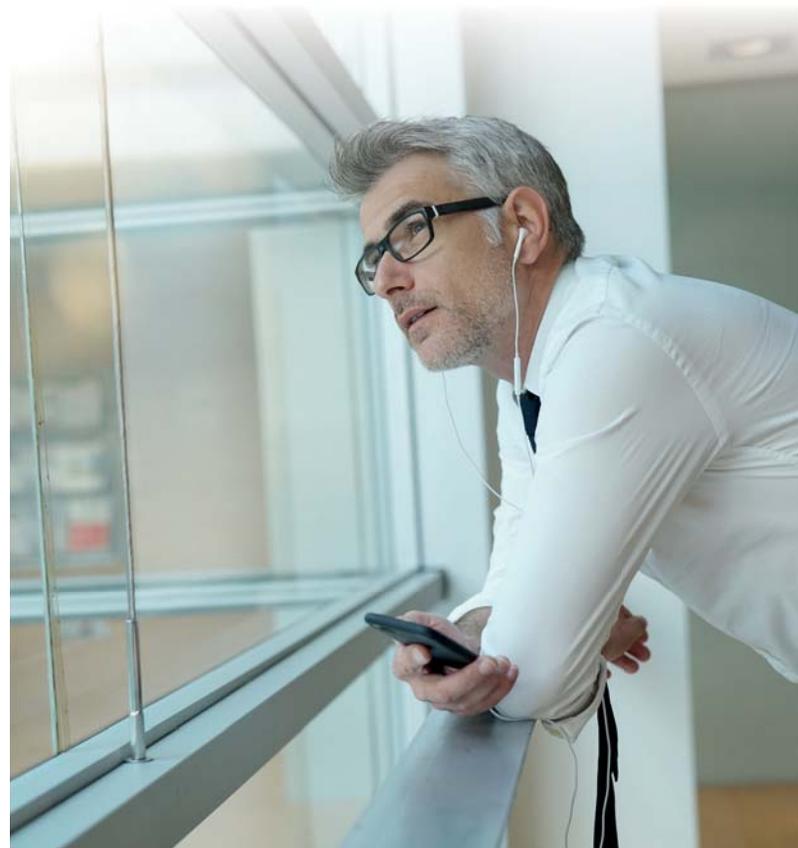

Shamir

Autograph™ III

Una nueva experiencia visual

DISPONIBILIDAD

ADD: +0.75 a +4.00 D.

Dioptrías prismáticas: Máximo 4

Altura mínima de adaptación: a partir de 11 mm

Shamir Autograph III	Claros			Transitions®		Polarizado	Drivewear	Photo Graph		
	CR-39	Poly plus	Ultra Thin	CR-39	Poly Plus	Poly Plus	Poly Plus	1.56	CR-39	Poly Plus
	Blue Zero™			CR-39	Poly Plus	Poly Plus	Poly Plus	1.56	CR-39	Poly Plus
Diámetro máximo	70 mm	70 mm	70 mm	72 mm	75 mm	76 mm	75 mm	70 mm	70 mm	75 mm
Esfera	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-10.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00
Cilindro	-5.00	-6.00	-7.00	-5.00	-6.00	-6.00	-6.00	-5.00	-5.00	-6.00
Glacier Blue-Shield™ UV	No incluido	No incluido	Incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido

Material	ML
CR-39	15
CR-39 Photo Graph	PHC
CR-39 Transitions® VII	TR
1.56 Photo Graph Colors	56
Poly Plus	PC
Poly Plus Photograph	PHP
Poly Plus Polarizado	PPZ
Poly Plus Drivewear®	PD
1.74 Ultra Thin	74

Marcas Láser	
 A ₃	 ADD

Disponibilidad

Combiando máximo: 12.00 D.

Transitions® VII, Photo Graph

y Polarizado disponibles en Gris y Café

Photo Graph colors, Rosa, Azul y Morado.

Consultar marcas láser de acuerdo a material

Datos solicitados

Todo lo que tiene que hacer para solicitar Shamir Autograph™ III es brindarnos la siguiente información:

- Receta del paciente (el armazón de prueba debe tener un ángulo pantoscópico de 0° al momento de la evaluación).
- Medidas del armazón: A, B, DBL, y ED o archivo Spark.
- Altura de adaptación y distancia Monopupilar (lejana)
- Ángulo facial.
- Ángulo pantoscópico (el paciente deberá colorar su cabeza en posición natural y mirar de frente durante la medición).
- Distancia de vértice.