




shamir

LENTES PROGRESIVOS

Shamir

InTouch™

Visión para la era digital

Shamir

InTouch™

Visión para la era digital

Progresivo multipropósito único en su tipo, con un avanzado diseño para el uso de dispositivos móviles.


¿Por qué elegir Shamir InTouch™?

Cobertura total del ángulo de visión en el uso de dispositivos móviles. Diseño extra suave en zonas de transición, evitando así sacrificar calidad visual.

VIENDO A TRAVÉS DE SHAMIR INTOUCH™



VIENDO A TRAVÉS DE AUTOGRAPH PLUS™

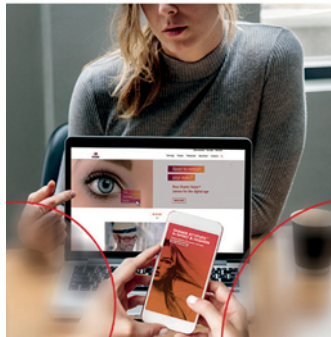

Shamir InTouch™ mejora la visión en un rango

40 cm

Desde

70 cm

Hasta

Cuándo recomendar Shamir InTouch™



Pacientes de lentes progresivos que tienen un moderno estilo de vida.




Usuarios frecuentes de dispositivos móviles.



Personas que buscan lentes progresivas que brinden el máximo confort en zonas visuales cercana e intermedia.

Proporciona máximo confort visual en cualquier distancia y actividad visual en el uso de dispositivos digitales móviles. Adecuado para una gran gama de formas, tamaños y estilos de armazón.

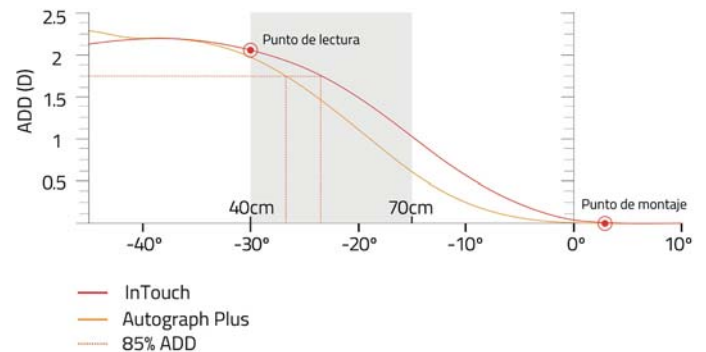

DISPONIBILIDAD

ADD: +0.75 a +3.50 D.



Dioptrías prismáticas: Máximo 4

Altura mínima de adaptación: 15 y 18 mm

Shamir InTouch™	Claros		Transitions®		Polarizado	Drivewear	Photo Graph		
	CR-39	Poly plus	CR-39	Poly Plus	Poly Plus	Poly Plus	1.56	CR-39	Poly Plus
	Blue Zero™								
Diámetro máximo	70 mm	70 mm	72 mm	75 mm	76 mm	75 mm	70 mm	70 mm	75 mm
Esfera	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00
Cilindro	-5.00	-6.00	-5.00	-6.00	-6.00	-6.00	-5.00	-5.00	-6.00
Glacier Blue-Shield™ UV	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido

Material	ML
CR-39	15
CR-39 Blue Zero	BZ5
CR-39 Photo Graph	PHC
CR-39 Transitions® VII	TR
1.56 Photo Graph Colors	56
Poly Plus	PC
Poly Plus Photograph	PHP
Poly Plus Blue Zero	BZP
Poly Plus Polarizado	PPZ
Poly Plus Drivewear®	PD

Marcas Láser	
	
I18	ADD

Marcas Láser	
	
I15	ADD

Disponibilidad

Combiando máximo: 12.00 D.

Transitions® VII, Photo Graph

y Polarizado disponibles en Gris y Café

Photo Graph colors, Rosa, Azul y Morado.

Consultar marcas láser de acuerdo a material

Datos solicitados

Todo lo que tiene que hacer para solicitar Shamir InTouch es brindarnos la siguiente información:

- Receta del paciente (el armazón de prueba debe tener un ángulo pantoscópico de 0° al momento de la evaluación).
- Medidas del armazón: A, B, DBL, y ED o archivo Spark.
- Altura de adaptación y distancia Monopupilar (lejana)
- Ángulo facial.
- Ángulo pantoscópico (el paciente deberá colorar su cabeza en posición natural y mirar de frente durante la medición).
- Distancia de vértice.